

Ferrex Vet CR 35


Mobiles und kompaktes Speicherfoliensystem *Der einfache Einstieg in das digitale Röntgen*

Computer Radiografie (CR) liefert den digitalen Ersatz des konventionellen Röntgenfilms und gleichzeitig enorme Vorteile, da Verbrauchsmaterialien nahezu eliminiert werden und die Zeit zum Bild erheblich reduziert werden kann.

Darüber hinaus können die digitalen Bilder unmittelbar mit anderen Nutzern geteilt und einfach archiviert werden.

Besonders hervorzuheben ist der vereinfachte Arbeitsablauf und die Möglichkeit die Bilder mittels Software zu optimieren und damit die Auswertung sicherer zu machen.

Das **Ferrex Vet CR 35** eignet sich sowohl für den stationären als auch für den mobilen Einsatz. Die Folien in unterschiedlichen Längen und einer max. Breite von 35 cm (besondere Eignung für HD Aufnahmen) werden manuell in das System eingegeben.

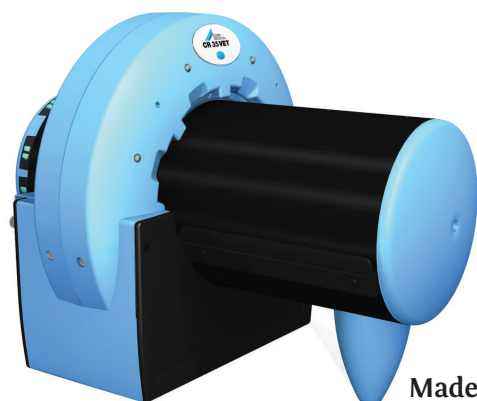

Made in Germany!



SOFTWARE:

Vet Exam: der einfache und schnelle Weg zu brillanten Bildern.

Mit der innovativen Benutzeroberfläche von **Vet Exam** erleben Sie intuitives Bedienen. So geht die tägliche Arbeit einfach von der Hand.

Gemeinsam mit dem **Ferrex Vet CR 35** steht damit ein optimal aufeinander abgestimmtes CR-System zur Verfügung, mit dem Sie einfach und sehr schnell zu sicheren Ergebnissen kommen. Einfacher kann der Einstieg in die CR-Technologie nicht sein.

Die 3 Schritte zum Bild:

- Auswahl von Halter und Tier (mit Möglichkeit der Anbindung an einer Praxisverwaltungssoftware)
- Auswahl des Aufnahmebereiches mittels der leicht verständlichen Piktogramme
- Diagnostik und Bildspeicherung: automatische Bildoptimierung, Vermessung oder z.B. Versand per E-Mail möglich

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen:	39 (H) x 38 (B) x 52 cm (T)
Gewicht:	21kg
Stromversorgung:	100-240 V 50-60 Hz, 120 Watt
Basis-Ortsauflösung:	abhängig von der Folie
Graustufenauflösung:	16 bit, 65.536 Graustufen
Max. Filmgröße:	max. 35 cm Breite, Länge nahezu unbegrenzt
Temperaturbereich:	10 bis 35°C
Lautstärke:	< 49 dB(A)
Anschluss:	USB 2
Laserklasse:	I (EN60825.1)
Software:	Duerr Vet Exam
Zubehör:	Transportcase, Batterie-Lösung, Speicherfolien, Folienkassetten
Löscheinheit:	hochleistungs-LED's löschen direkt nach dem Scan zuverlässig sämtliche Informationen von der Bildplatte



FERREX VET SOLUTIONS
...ein Unternehmen von Ferrex, Gosche & Partnern



FERREX VET SOLUTIONS GmbH

Hauptstr. 75 • D-46244 Bottrop-Kirchhellen • Tel. +49 (0)2045-41372-0 • Fax +49 (0)2045-41372-10
www.vet-xray.de - www.ferrex-vet-solutions.de - www.pss-gruppe.de

